



上海岁荣-临床科研数据库系统

专科指标图片功能演示

2020-06-27

专科指标图片分两种应用情况：

- 1、 专科指标的【类型】如果是【图片】，则根据所选值显示相应图片。仅限于专科指标录入界面。
- 2、 专科指标图片扩展：专业名称_指标分组_指标名称_指标值.JPG 做图片浏览。

适合于专科指标录入和【病例浏览】的【专科指标】的界面，鼠标点指标，按如下顺序显示对应的文件：

如果有【指标值】对应的图片文件，则优先该图片显示：

专业名称_指标分组_指标名称_指标值.jpg

否则如果有【指标名称】对应的图片文件，则优先该图片显示：

专业名称_指标分组_指标名称.jpg

否则如果有【指标分组】对应的图片文件，则优先该图片显示：

专业名称_指标分组.jpg

否则如果有【专业名称】对应的图片文件，则优先该图片显示：

专业名称.jpg

版权所有：上海岁荣网络

www.suirong.net


一、 专科指标的【类型】是【图片】

该功能仅限于【专科指标录入】界面，该功能很早就具备。

首先。在专科指标的字典配置中需要设置指标的属性【类型】为图片：



指定目录下，按照：指标分组_指标名称_指标值.jpg 格式存放：

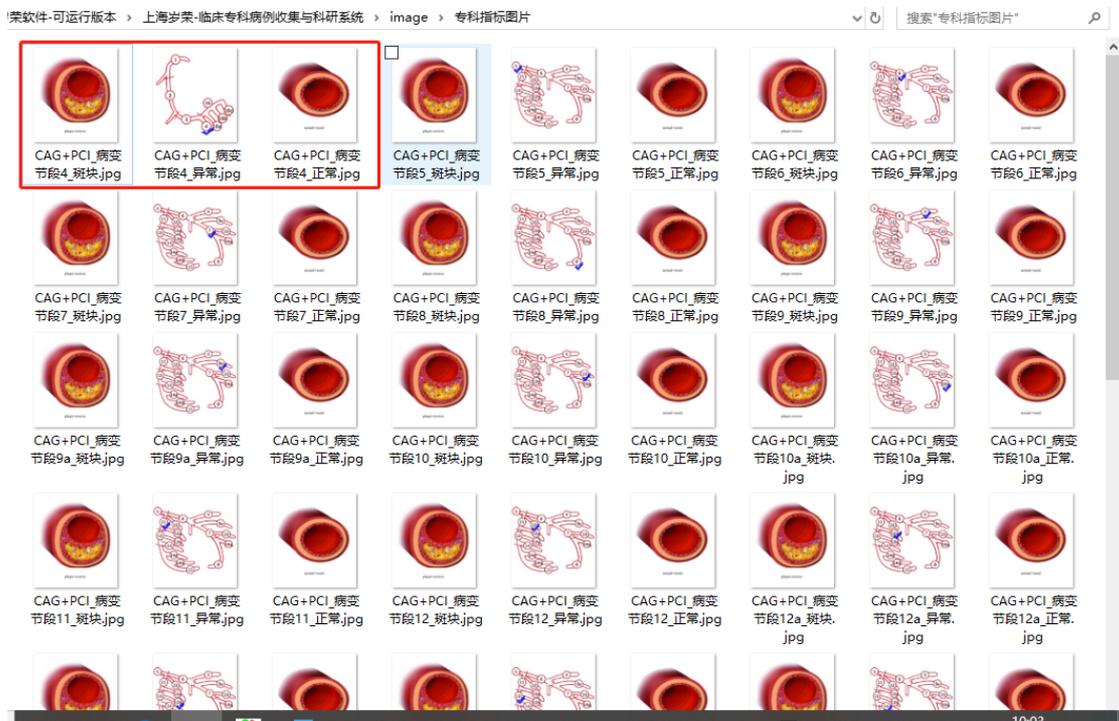

这样，在指标录入界面，可以根据所选值来浏览对应的图片

上海AA大学第一附属医院88科-临床科研数据库(试用版)-指标录入-专科指标

上海岁荣 www.suirong.net

专科指标录入 (CRF表) one: CAG-PCI_病变节段3=正常

刷新自动计算指标 指标字典(T) 提交保存(S) 关闭(X)

专科指标所属时间: 2020-06-27 10:04:42 | 病例编号: Test_14

自动导入指标【所属专业=默认】 格式化输入 全部指标格式化 每行个数: 4 启用双份输入 显示[专业]+[指标所属时间]栏目 自动下一个指标


[从模板导入](#) [保存到模板](#) [删除一行\(D\)](#) [数据检查\(C\)](#) [全屏图片\(V\)](#)

专业模板	指标分组	指标名称	指标值	单位	指标所属时间	指标录入时间
默认	CAG-PCI	病变节段1	正常		2020-06-27 10:04:43	2020-06-27 10:04:46
		病变节段2	异常		2020-06-27 10:04:43	2020-06-27 10:04:55
		病变节段3	正常		2020-06-27 10:04:43	2020-06-27 10:05:03
共3行						

常用值和可选值 (CTRL+多选, F3聚焦)

正常
异常
斑块

所选专科指标对应的值, 有图片可浏览

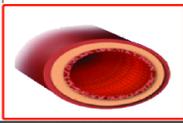

专科指标的图片不存在:
image\专科指标图片\CAG-PCI_病变节段3_正常.jpg

指标值为【正常】的图提示

上海AA大学第一附属医院88科-临床科研数据库(试用版)-指标录入-专科指标

上海岁荣 www.suirong.net

专科指标录入 (CRF表) one: CAG-PCI_病变节段3=异常

刷新自动计算指标 指标字典(T) 提交保存(S) 关闭(X)

专科指标所属时间: 2020-06-27 10:04:42 | 病例编号: Test_14

自动导入指标【所属专业=默认】 格式化输入 全部指标格式化 每行个数: 4 启用双份输入 显示[专业]+[指标所属时间]栏目 自动下一个指标


[从模板导入](#) [保存到模板](#) [删除一行\(D\)](#) [数据检查\(C\)](#) [全屏图片\(V\)](#)

专业模板	指标分组	指标名称	指标值	单位	指标所属时间	指标录入时间
默认	CAG-PCI	病变节段1	正常		2020-06-27 10:04:43	2020-06-27 10:04:46
		病变节段2	异常		2020-06-27 10:04:43	2020-06-27 10:04:55
		病变节段3	异常		2020-06-27 10:04:43	2020-06-27 10:06:17
共3行						

常用值和可选值 (CTRL+多选, F3聚焦)

正常
异常
斑块

指标值为【异常】的图片提示

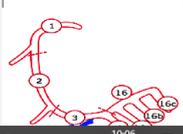

专科指标的图片不存在:
image\专科指标图片\CAG-PCI_病变节段3_异常.jpg

上海AA大学第一附属医院BB科-临床科研数据库(试用版)-指标录入-专科指标

上海岁荣 www.suirong.net

专科指标录入 (CRF表)

刷新自动计算指标 指标字典(T) 提交保存(S) 关闭(X)

one: CAG-PCI_病变节段3=斑块

专科指标所属时间: 2020-06-27 10:04:42 病例编号: Test_14


自动导入指标【所属专业=默认】 格式化输入 全部指标格式化 每排个数: 4 启用双份输入 显示【专业】+【指标所属专业】

导入指标... 从模板导入 保存到模板 删除一行(E) 数据检查(P) 全屏照片(O)

专业模版	指标分组	指标名称	指标值	单位	指标所属	常用值和可选值(CTRL多选, F3聚焦)
默认	CAG-PCI	病变节段1	正常		2020-06-27	正常
		病变节段2	异常		2020-06-27	异常
		病变节段3	斑块		2020-06-27	斑块
共3行						

专科指标的图片不存在。
image\专科指标图片\CAG-PCI_病变节段3_斑块.jpg

指标值为【斑块】对应的图片提示

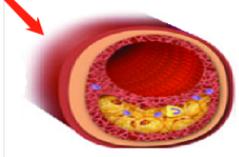

说明：只支持 JPG 格式文件。扩展名必须为 JPG


二、 专科指标图片扩展

之前的专科指标有【指标输入辅助说明】栏目，可以在格式化输入界面提示该指标的输入注意事项。列表输入模式下就不方便提示了。

此外，为什么要这个专科指标，为什么要做这么个指标分组等，就无法体现设计者意图。

增加【专科指标图片扩展】功能，就可以很好的体现设计者的意图，图形化描述：专业名称、指标分组、指标名称、指标值四者之间的关系。可以四个级别体现。

可根据需要设计上述指标的图片，并且按照上述规则命名，扩展名为 JPG，存放到指定目录：Image\专科指标图片：

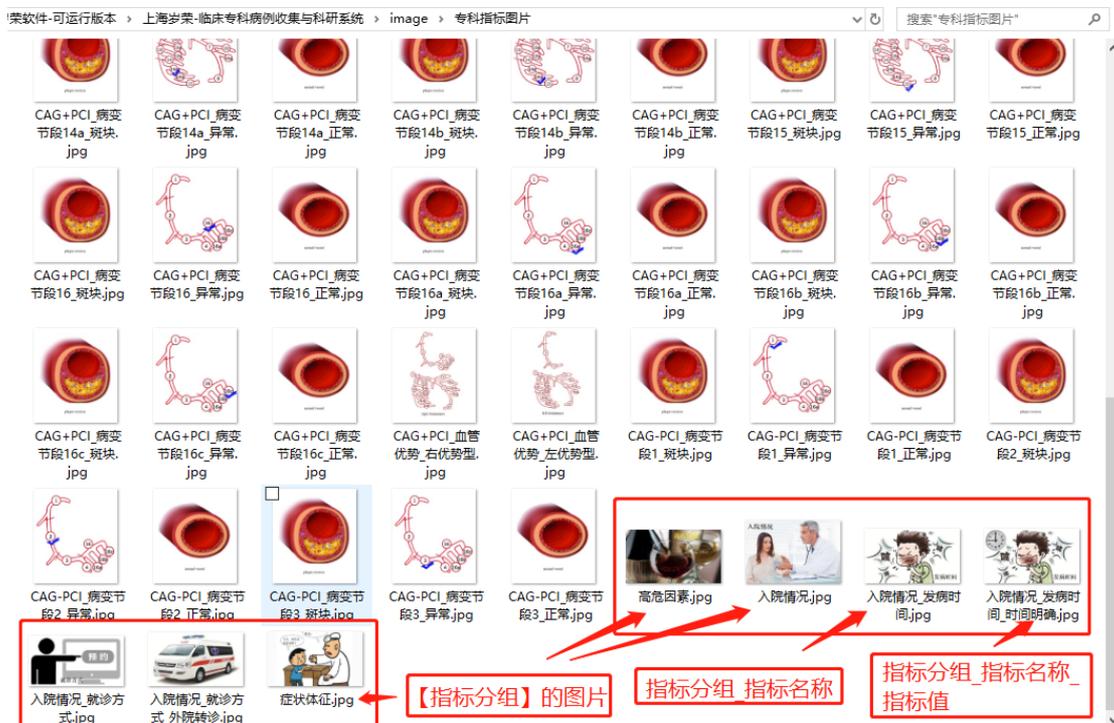

把图片文件做好放这里就可以了

接下来进入软件，看看浏览界面：

上海AA大学第一附属医院BB科-临床科研数据库(试用版)-病例浏览

病例浏览 Test_01 / 柳云龙: 专科指标

编辑【[专科指标](#)】 [相似病例检索\(A\)](#) [检验项目分析\(B\)](#) [时间轴展示\(C\)](#) [病例报告单\(D\)](#) [预约登记\(E\)](#) 点击浏览历史指标

专业模板	指标分组	个	专业模板	指标分组	指标名称	指标值	单位
默认	入院情况	10	默认	入院情况	发病时间	时间明确	
	症状体征	15			就诊方式	外院转诊	
	高危因素	10			急诊NIHSS评分	13	
	各个时间点	18			急诊GCS评分	221	
	实验室检查	17			OCSP分型	后循环	
	术前影像学	10			TOAST分型	其他原因	
	术前治疗	10			病灶位置	后循环	
	手术情况	18			发病前mRS	2	
	术中材料	14			发病前TIA	一周内	
	并发症	14			发病时外伤史	无	
	术后评估	18	症状体征		意识水平	嗜睡	
	术后影像学	15			意识水平提问NIHSS	1	
	疗效评估	6			意识水平指令NIHSS	2	
	病理诊断	3			凝视	部分	
	随访指标	12			视野		
	CAG-PCI	3			口角歪斜		
合计:		16组/192个指标			肢体无力侧别	双侧	
					上肢肢体肌力	1	
					下肢肢体肌力		
					共济失调		
					感觉障碍		
					失语	传导性	
					失语程度		
					构音障碍		

点这个指标, 有图片:
入院情况_发病时间_时间明确.jpg

入院情况_发病时间_时间明确.jpg

上海AA大学第一附属医院BB科-临床科研数据库(试用版)-病例浏览

病例浏览 Test_03 / 吴晋卿: 专科指标

编辑【[专科指标](#)】 [相似病例检索\(A\)](#) [检验项目分析\(B\)](#) [时间轴展示\(C\)](#) [病例报告单\(D\)](#) [预约登记\(E\)](#) 点击浏览历史指标

专业模板	指标分组	个	专业模板	指标分组	指标名称	指标值	单位	指标所属时间
默认	入院情况	17	默认	入院情况	发病时间			2017-05-28 20:00
	症状体征	15			就诊方式			2017-05-28 20:00
	家庭情况	17			急诊NIHSS评分			2017-05-28 20:00
	高危因素	10			急诊GCS评分			2017-05-28 20:00
	患者联系方式	11			OCSP分型			2017-05-28 20:00
	各个时间点	18			生长情况	成功		2017-05-28 20:00
	围产情况	17			TOAST分型			2017-05-28 20:00
	实验室检查	17			病灶位置			2017-05-28 20:00
	过敏史	5			发病前mRS	0		2017-05-28 20:00
	家族史	6			发病前TIA			2017-05-28 20:00
	术前影像学	9			发病时外伤史	无		2017-05-28 20:00
	术前治疗	10			个人照片	工人		2017-05-28 20:00
	手术情况	18			父亲职业	工人		2017-05-28 20:00
	术中材料	14			ROP手术	否		2017-05-28 20:00
	临床表现	15			父亲姓名			2017-05-28 20:00
	并发症	14			母亲姓名	否		2017-05-28 20:00
	主要治疗	12			母亲职业	否		2017-05-28 20:00
	术后评估	18			意识水平			2017-05-28 20:00
					意识水平提问NIHSS			2017-05-28 20:00
					意识水平指令NIHSS			2017-05-28 20:00
					凝视			2017-05-28 20:00
					视野			2017-05-28 20:00
					口角歪斜			2017-05-28 20:00
					肢体无力侧别			2017-05-28 20:00

没有指标值

入院情况_发病时间.jpg
这是没有指标值的情况

上海AA大学第一附属医院BB科-临床科研数据库(试用版)-病例浏览

病例浏览 Test_03 / 吴晋卿: 专科指标

编辑【[专科指标](#)】 [相似病例检索\(A\)](#) [检验项目分析\(B\)](#) [时间轴展示\(C\)](#) [病例报告单\(D\)](#) [预约登记\(E\)](#) 点击浏览历史指标值

专业模版	指标分组	个	专业模版	指标分组	指标名称	指标值	单位	指标所属时间
默认	入院情况	17	默认	入院情况	发病时间			2017-05-28 20:...
	症状体征	15			就诊方式			2017-05-28 20:...
	家庭情况	17			急诊NIHSS评分			2017-05-28 20:...
	高危因素	10			急诊GCS评分			2017-05-28 20:...
	患者联系方式	11			OCSP分型			2017-05-28 20:...
	各个时间点	18			生长情况	成功		2017-05-28 20:...
	围产情况	17			TOAST分型			2017-05-28 20:...
	实验室检查	17			病灶位置			2017-05-28 20:...
	过敏史	5			发病前mRS	0		2017-05-28 20:...
	家族史	6			发病前TIA			2017-05-28 20:...
	术前影像学	9			发病时外伤史	无		2017-05-28 20:...
	术前治疗	10			个人照片	工人		2017-05-28 20:...
	手术情况	18			父亲职业	工人		2017-05-28 20:...
	术中材料	14			ROP手术	否		2017-05-28 20:...
	临床表现	15			父亲姓名			2017-05-28 20:...
	并发症	14			母亲姓名	否		2017-05-28 20:...
	主要治疗	12			母亲职业	否		2017-05-28 20:...
	术后评估	18			意识水平			2017-05-28 20:...
	术后评估	18			意识水平提问NIHSS			2017-05-28 20:...
	术后评估	18			意识水平指令NIHSS			2017-05-28 20:...
	术后评估	18			凝视			2017-05-28 20:...
	术后评估	18			视野			2017-05-28 20:...
	术后评估	18			口角歪斜			2017-05-28 20:...
	术后评估	18			肢体无力侧别			2017-05-28 20:...

入院情况.JPG 只有分组名称的情况



上海AA大学第一附属医院BB科-临床科研数据库(试用版)-病例浏览

病例浏览 Test_03 / 吴晋卿: 专科指标

编辑【[专科指标](#)】 [相似病例检索\(A\)](#) [检验项目分析\(B\)](#) [时间轴展示\(C\)](#) [病例报告单\(D\)](#) [预约登记\(E\)](#) 点击浏览历史指标值

专业模版	指标分组	个	专业模版	指标分组	指标名称	指标值	单位	指标所属时间
默认	手术情况	18	默认	手术情况	介入治疗	取栓		2017-05-28 20:42:...
	术中材料	14			使用机器	Simens		2017-05-28 20:42:...
	临床表现	15			是否肝素化			2017-05-28 20:42:...
	并发症	14			责任血管			2017-05-28 20:42:...
	主要治疗	12			侧枝代偿水平ASITN-SIR			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			治疗策略			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			麻醉方式			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			取栓次数			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			闭塞血管长度mm			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			再通AOL分级			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			再通级别 (mTICI)			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			DymaCT或XperCT结果			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			操作相关并发症			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			出血转换			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			是否合并责任血管狭窄			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			责任血管狭窄程度			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			静脉早显			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			早显静脉个数			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			术中特殊情况			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			术后测压: 右肺动脉			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			术中处理侧支			2017-05-28 20:42:...
	术后评估	18			二次转机			2017-05-28 20:42:...

共22行

临床科研单病种数据库
病例报告表
(Case Report Form)

病例编号: _____
临床诊断: _____

这是默认专科指标的图片



这是指标录入界面的浏览



三、 总结:

- 1、 默认的一套专科指标，专业名称为空。
- 2、 专业名称为空的专科指标对应的图片文件名就以【指标分组】开头。
- 3、 该功能可以在【选项】界面关闭或启用:

